


機械器具 62 歯科用切削器  
一般医療機器 歯科用スケーラ 35320000  
**デプラーカー**

**【形状、構造及び原理等】**

両端に作業部があり、作業部の形状は 2 種類あり、左右対称になっている。


## 1. デプラーカー ユニバーサル

主に、インプラントネック（アバットメント及びフィクスチャー）の歯間表面の清掃に用いる。

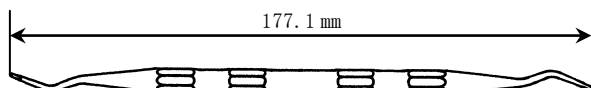

## 2. デプラーカー オロフェイシャル

主に、インプラントネック（アバットメント及びフィクスチャー）の頬側／舌側表面の清掃に用いる。

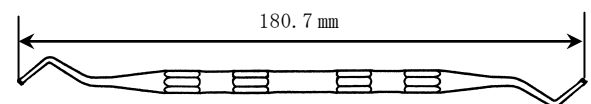


原材料：ポリフェニレンサルファイド（PPS）  
（カーボン繊維含有）

**【使用目的、効能又は効果】**

口腔内清掃及び歯周治療時にインプラントネック（アバットメント及びフィクスチャー）の表面から歯垢や歯石等の沈着物を除去するために用いる。

**【操作方法又は使用方法等】**

先端でインプラントネック（アバットメント及びフィクスチャー）の表面から歯垢や歯石等の沈着物を除去する。

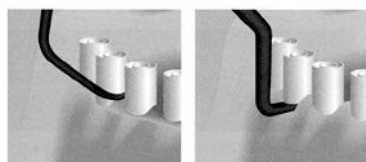

ユニバーサル      オロフェイシャル

**【使用上の注意】**

1. 使用期限を確認すること。
2. 使用前に必ず消毒・滅菌（保守点検に係わる事項参照）を行うこと。
3. 折損等の原因となるので、器具に対して曲げ、切削、打刻（刻印）等の二次加工（改造）を絶対行わないこと。
4. 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
5. 必要に応じて通常の方法で研いで、使用すること。

**【貯蔵・保管方法及び使用期限等】**


## [貯蔵・保管方法]

- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- ・ 洗浄、消毒、滅菌後の製品は、水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆、シミ等の原因となることがある。

## [使用期限]

本材は包装に記載の※使用期限までに使用すること。

[記載の使用期限は自己認証（製造元データ）による]

※（例） 12/2015 は使用期限 2015 年 12 月を示す）

**【保守・点検に係る事項】**

1. 使用前・使用後の点検
  - ・ 破損、ヒビ、キズ、腐食等がないか確認すること。これらがある場合は、使用を中止すること。
  - ・ 使用後は、感染防止のため洗浄・消毒又は滅菌すること。
2. 洗浄・消毒
  - 1) 使用後は、目視で確認できる汚れ、血液や唾液等を器具からブラシ等を用いて温水や洗剤で取り除く。
  - 2) 確認して、まだ汚れが残っていれば、1) を繰り返し洗浄する。
  - 3) あるいは超音波洗浄器で洗浄する。
  - 4) 汚れが除去されていることを確認後、プラスチック用の消毒剤を用いて薬液消毒を行う。
  - 5) 温水ですすぎ、乾かす。
  - 6) あるいは 1)～5) の代わりに器具除染用洗浄器（ウォッシュ・デイスインフェクター）で洗浄及び熱消毒（93℃）を実施する。
3. 滅菌  
高圧蒸気滅菌（134℃、3分間）を実施する。

## [保守・点検に関する注意事項]

1. 洗浄、消毒、滅菌には、できるだけ精製水を使用すること。
2. 損傷を避けるため、洗浄、消毒、滅菌中は、できるだけ器具を容器やトレイの中で固定して置くこと。
3. 薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に記載された使用上の注意を守ること。
4. ケミクレーブは行わないこと。
5. 洗浄器を使用する際には、洗浄器の取扱説明書及び注意書きをよく読み、使用すること。
6. 滅菌中は、高圧蒸気滅菌器の金属部分に接触しないように注意すること。
7. 高温（134℃以上）での乾燥は、器具の材質に影響を与えるので、乾燥工程は高温で行わないこと。

**【包装】**

P/N 1350	デプラーカー	ユニバーサル	5 本入
P/N 1351	デプラーカー	ユニバーサル	2 本入
P/N 1360	デプラーカー	オロフェイシャル	5 本入
P/N 1361	デプラーカー	オロフェイシャル	2 本入

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】**

製造販売業者	：カボデンタルシステムズジャパン株式会社
住所	：〒581-0067 大阪府八尾市神武町 2 番 24 号 日本通運株式会社天王寺支店 メディカルセンター内
電話番号	：072-947-2028
製造業者	：カー・ハーヴェ社（KerrHawe SA）
国名	：スイス（Switzerland）